

Den originale MEYLAND CARLIFT



Den fastmonterede liftkonsol er det eneste synlige i bilen, når liften er taget af.

MEYLAND CARLIFT er den ideelle løfteløsning i bilen!

MEYLAND CARLIFT løfter problemløst handicappede ind og ud af bilen. Liften kan betjenes af den handicappede selv - eller om nødvendigt - af en hjælper. MEYLAND CARLIFT kan monteres i fører- eller passagersiden i to- eller fire-dørs biler, og løftearmen er udskydelig for tilpasning til forskellige bilstørrelser. Hæve-sænke funktionen udføres af en 12 volt motor, der forsynes med spænding fra bilens akkumulator. Styringen sker fra en lille kontrolboks med trykknapper, og boksen er magnetisk, så den kan sættes vilkårligt på liften, når den ikke skal bruges. Boksen er forbundet til liften med en spiralledning, så en hjælper uden for bilen kan betjene liften. Side-/svingbevægelsen sker manuelt. MEYLAND CARLIFT leveres med et løftesejl der er trepunktsophængt for sikkert løft, og sejlet fås i 5 størrelser (se bagsiden). Når MEYLAND CARLIFT ikke benyttes eller under kørslen kan den enten blive på den fastmonterede liftkonsol eller med ét enkelt greb løftes af og lægges i bagagerummet. Ved demontering af liftkonsollen opstår der normalt ingen synlige spor efter liften i vognen, hvilket er en fordel, hvis bilen skal sælges.


MEYLAND CARLIFT er den ideelle løfteløsning i hjemmet!

MEYLAND CARLIFT kan også anvendes indendørs f.eks. i soveværelset eller badeværelset og betjenes på samme måde som i bilen. Liften kan anvendes til løft mellem kørestol og seng, toilet, badekar o.s.v. Desuden kan MEYLAND CARLIFT løfte en person fra gulvet! Til brug i hjemmet fås en højdeindstillelig vægkonsol, der skrues fast på væggen det ønskede sted. MEYLAND CARLIFT hægtes på konsollen og forsynes med spænding fra en 12/230 volt transformator. Både lift og transformator kan benyttes til flere løftesteder i hjemmet. Der kan desuden fås et forlængerled, så løftearmen svinger over et større område. Den er også praktisk hvor pladsforholdene er trange eller vanskelige.

MEYLAND CARLIFT løftes med ét greb af konsollen – vejer kun 13,5 kg – men løfter op til 125 kg !



Sejlet til MEYLAND CARLIFT

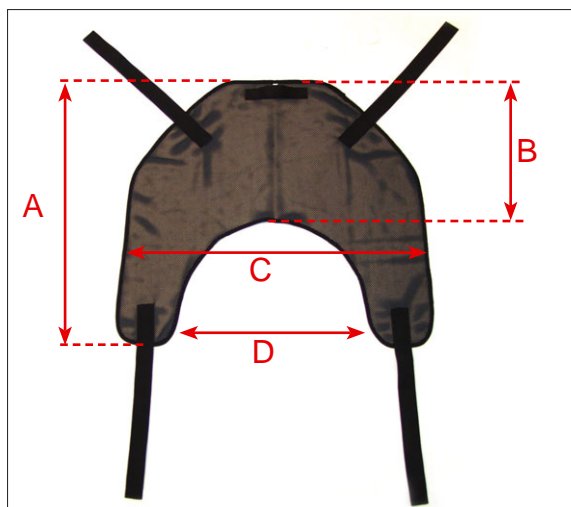

Sejlet kan fås i 2 størrelser:

	A:	B:	C:	D:
No. 1	102 cm	46 cm	91 cm	56 cm
Størrelsen svarer til en kropsvægt på ca. 70 - 125 kg og en højde på 1.70 m eller mere.				
No. 5 (std.)	83 cm	46 cm	86 cm	50 cm
Størrelsen svarer til en kropsvægt på op til ca. 70 kg og en højde på under 1.75 m.				

Tekniske data

Længde:	57 - 65 cm
Bredde:	10 cm
Løftesejl, standard:	No. 5
Min. højde:	35 cm
Løftehøjde:	39 cm
Max. belastning:	125 kg
Vægt:	13,5 kg
HMI nummer:	19128

Konstruktion

- Fremstillet i stål
 - Pulverlakeret / el-galvaniseret
 - Specialfremstillet kvalitetsaktuator fra SKF
 - Relæstyring med indbygget fejlsikring
 - Løftesejl i kraftigt nylon net med brede nylonjorde
- (Ret til ændringer i design og konstruktion forbeholdes.)

Farve




Grå (RAL 7011)



Nylon net

Tilbehør

- Ekstra liftkonsol-monteringsæt til bil
- Vægkonsol
- Forlængerled
- Forhøjertap
- Ekstra nylon-løftesejl

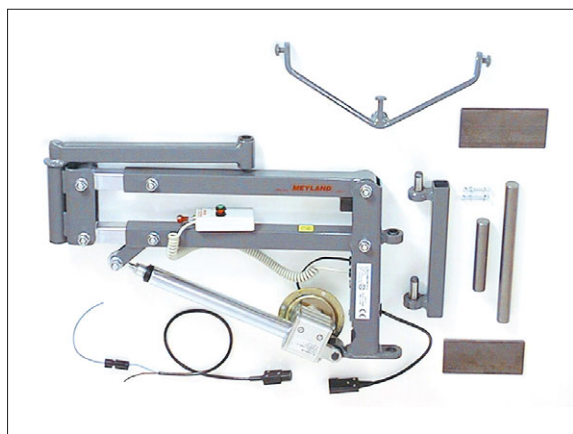

Delene til montering af liften i bil.

meyland-smith
mobility and more

Industrivej 27
DK-9830 Taars
Tel: +45 98 96 19 85
Fax: +45 98 96 19 86
www.meyland-smith.dk